


1

**Tristel**™

Pre-Clean Wipe

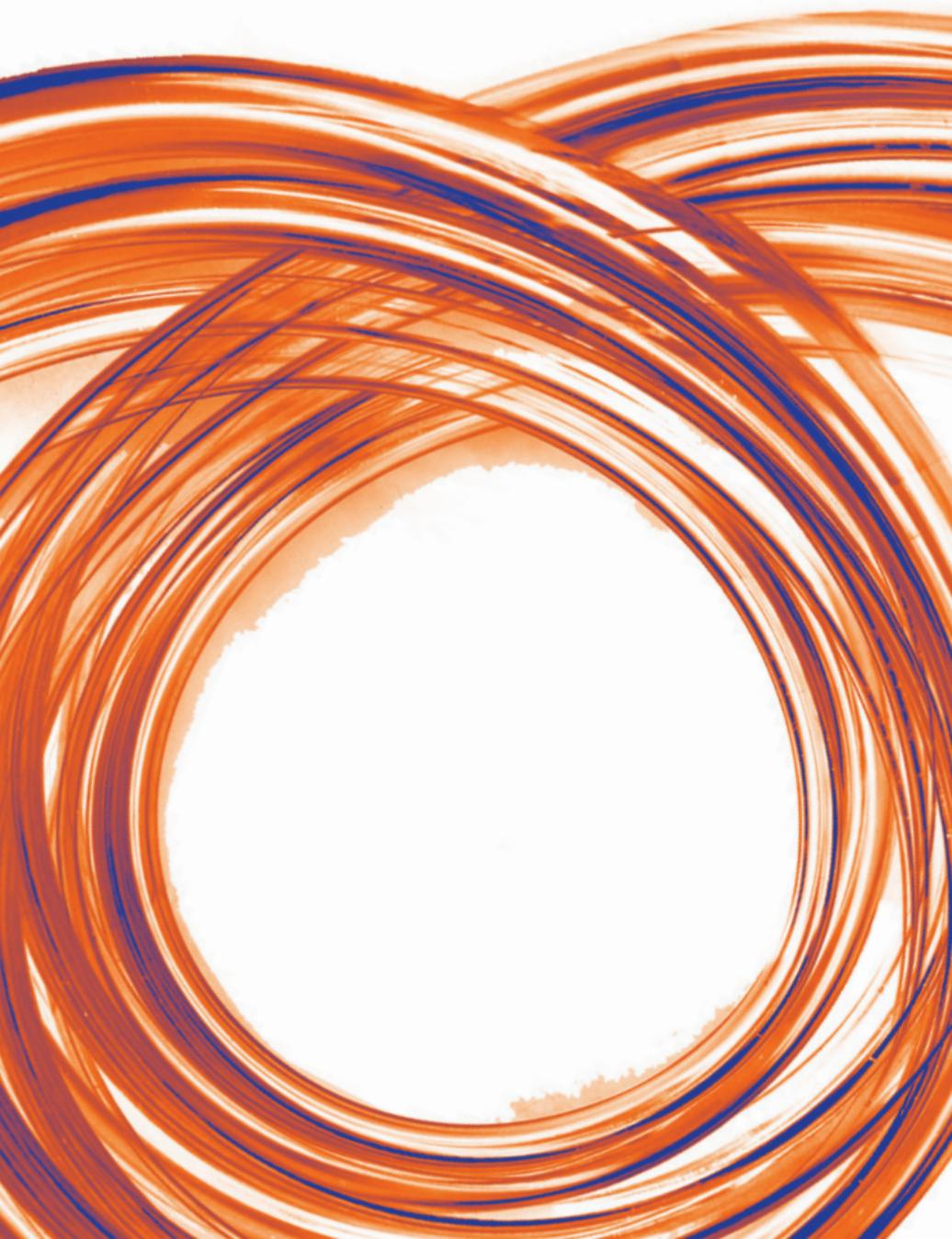

## USER INSTRUCTIONS

- Disinfect hands and wear gloves when handling disinfectants and medical devices.
- Wear appropriate Personal Protective Equipment (PPE).
- Do not use if the Wipe sachet is damaged or the Wipe is discoloured, damaged or dry.
- Keep the empty Wipe sachets to complete the Tristel Quality Audit Trail Record Book at the end of the decontamination procedure.
- Continuous wiping of the surface is not necessary and should be avoided to prevent shedding of the Wipe.
- For professional use only.
- These Instructions for Use (IFU) should be used in conjunction with the product label, Safety Data Sheet (SDS) and device manufacturer's instructions.
- Do not use past the expiry date.

The first step in the decontamination procedure of medical devices is cleaning of the surface to remove soil and organic matter prior to high-level disinfection. The Tristel Pre-Clean Wipe is impregnated with a triple-enzymatic detergent and surfactant.

The Tristel Pre-Clean Wipe is CE Marked as a Class I Medical Device (MDD 93/42 EEC).



### STEP 1

Disinfect hands and wear gloves when handling disinfectants and medical devices.

### STEP 2

Take one Pre-Clean Wipe sachet.

### STEP 3

Remove the Wipe from its sachet and lay it out in the palm of your hand.

### STEP 4

Wipe the surface of the medical device until soil and organic matter have been visibly removed. In case of heavy soiling more than one Wipe may be used.

### STEP 5

Discard the used Wipe and gloves in accordance with local regulations. Do not reuse. Keep the empty Wipe sachet for traceability.

Please complete the Tristel Quality Audit Trail Record Book to keep record of the decontamination procedure.

Manufactured by: Tristel Solutions Limited  
Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire CB8 7NY

T +44 (0)1638 721500 - F +44 (0)1638 721911 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

## GEBRAUCHSANLEITUNG

- Desinfizieren Sie Ihre Hände und tragen Sie Handschuhe beim Umgang mit Medizinprodukten.
- Tragen Sie persönliche Schutzkleidung (PSA).
- Bitte verwenden Sie die Tücher nicht, wenn die Tuchverpackung beschädigt ist oder das Tuch verfärbt, beschädigt oder trocken ist.
- Sofern Sie das Protokollbuch verwenden, heben Sie die leeren Tuchverpackungen bis zur Beendigung des Aufbereitungsprozesses auf.
- Kontinuierliches Wischen auf der Oberfläche ist nicht erforderlich und sollte unterlassen werden, um ein Auseinanderreißen des Tuchs zu vermeiden.
- Nur für den professionellen Gebrauch.
- Diese Gebrauchsanleitung sollte in Verbindung mit dem Produktetikett, dem Sicherheitsdatenblatt (SDB) und den Anweisungen des Medizinprodukteherstellers verwendet werden.
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.

Der erste Schritt im Aufbereitungsprozess von Medizinprodukten ist die Reinigung der Oberfläche zum Entfernen sichtbarer Verunreinigungen und organischen Materials vor der anschließenden Desinfektion. Das Tristel Pre-Clean Wipe (Reinigungstuch) ist mit einer dreifach-enzymatischen Reinigungs- und Tensidlösung getränkt.

Es trägt das CE-Zeichen als Medizinprodukt der Klasse I (Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG).



### SCHRITT 1

Desinfizieren Sie Ihre Hände und tragen Sie Handschuhe, wenn Sie mit Desinfektionsmitteln und Medizinprodukten hantieren.

### SCHRITT 2

Nehmen Sie eine Pre-Clean Wipe Verpackung.

### SCHRITT 3

Entnehmen Sie das Reinigungstuch und breiten Sie es auf Ihrer Handfläche aus.

### SCHRITT 4

Wischen Sie die Oberfläche des Medizinproduktes ab, bis sichtbare Verunreinigungen und organisches Material entfernt sind. Bei starker Verunreinigung benötigen Sie eventuell mehrere Tücher.

### SCHRITT 5

Entsorgen Sie das gebrauchte Reinigungstuch und die Handschuhe gemäß den geltenden Bestimmungen. Nicht wiederverwenden. Sofern Sie das Protokollbuch verwenden, heben Sie die leere Tuchverpackung für die Dokumentation auf.

Führen Sie das zugehörige Tristel Protokollbuch gewissenhaft, um alle Aufbereitungen nachverfolgen zu können.

Hersteller: Tristel Solutions Ltd

Vertrieb in Deutschland: Tristel GmbH, Karl-Marx-Allee 90A, 10243 Berlin, Deutschland  
T +49 (0)30 54844226 - F +49 (0)30 54819232 - E vertrieb@tristel.com

Vertrieb in der Schweiz: Tristel AG, Sandgrube 29, CH-9050, Appenzell  
T +41 (0)71 5670658 - E schweiz@tristel.com

# Tristel™

WE HAVE CHEMISTRY.



Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY  
T +44 (0)1638 721500 - F +44 (0)1638 721911 - E [mail@tristel.com](mailto:mail@tristel.com) - W [www.tristel.com](http://www.tristel.com)

**Australian sponsor:** Tristel Pty Ltd. 40/328 Reserve Road, Cheltenham, VIC 3192, Australia  
T 1300 680 898 - E [mail-au@tristel.com](mailto:mail-au@tristel.com)

The Tristel Rinse Wipes is classified under the Australian Register of Therapeutic Goods as a Class Is medical device, AUST R number: 173046.

For Tristel patent information please visit [www.our-patents.info/tristel](http://www.our-patents.info/tristel)

Contact Tristel, your local distributor or visit [www.tristel.com](http://www.tristel.com) for supporting documents such as safety data sheets, microbiological test data and reports.

**EC REP** Tristel NV, Smallandlaan 14B,  
2660 Antwerp, Belgium



PRE/089/4  
November 2020