


OPMERKINGEN


- Niet gebruiken als de fles beschadigd is.
- Desinfecteer uw handen en draag handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het gebruik van desinfectiemiddelen en medische hulpmiddelen.
- De aanbevelingen voor het dragen van PBM kunnen per instelling verschillen. Volg de lokale richtlijnen.
- Wanneer u Tristel DUO ULT voor de eerste keer gebruikt, druk dan twee tot vier keer op de pomp om deze te activeren.
- Reinig de medische hulpmiddelen grondig voordat u ze desinfecteert. De aanwezigheid van achtergebleven verontreiniging vermindert de werkzaamheid van elk desinfectiemiddel. Volg het ziekenhuisprotocol en de instructies van de fabrikant van het medisch hulpmiddel.
- Niet gebruiken op zachte metalen of roestvrij staal van mindere kwaliteit.
- Wattenstaafjes kunnen gebruikt worden om Tristel DUO ULT aan te brengen op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals inkepingen of groeven.
- Uitsluitend bestemd voor gebruik door zorgprofessionals.
- Deze wallchart moet gebruikt worden in combinatie met de gebruiksaanwijzing (IFU), het productetiket, de veiligheidsinformatiebladen (SDS) en de instructies van de fabrikant van het hulpmiddel.

GEBRUIKSAANWIJZING

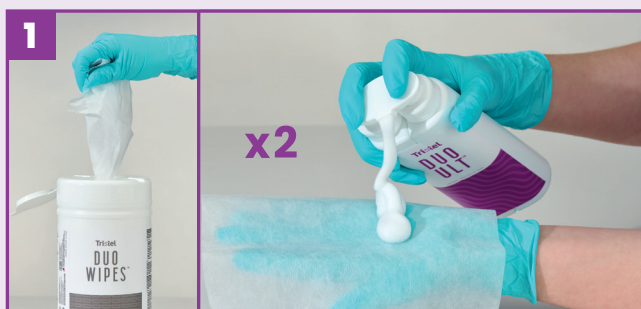

Breng twee doses Tristel DUO ULT aan op een droog doekje.

Opmerking: DUO WIPES-doekjes worden aanbevolen.

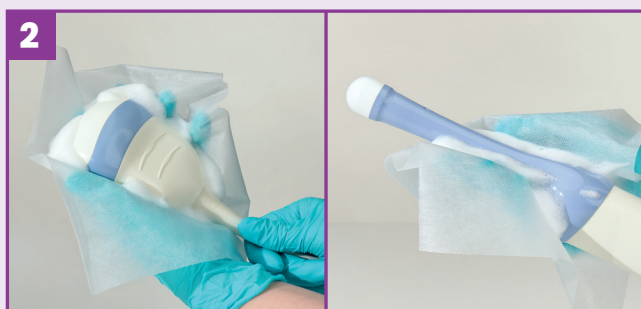

Gebruik het doekje om het schuim over het oppervlak van het hulpmiddel te verdelen en zorg ervoor dat alle zones volledig bedekt zijn. Gebruik indien nodig een wattenstaafje om het schuim in inkepingen aan te brengen.

Opmerking: Gooi het gebruikte doekje weg volgens de lokale voorschriften. Niet hergebruiken.



Zorg ervoor dat het hulpmiddel gedurende een minimale contacttijd van 30 seconden nat blijft. Laat aan de lucht drogen.

Opmerking: Bewaar het medisch hulpmiddel in overeenstemming met de ziekenhuisprotocollen om schade of herbesmetting te voorkomen.