


3

Tristel™

Rinse Wipe

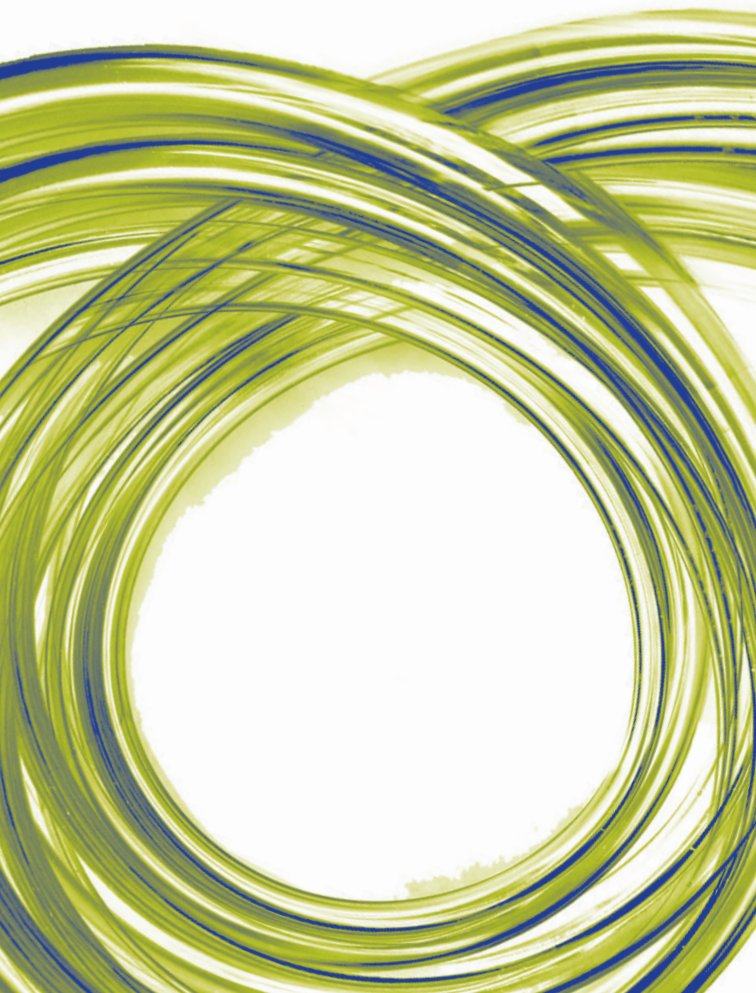

USER INSTRUCTIONS

- Disinfect hands and wear gloves when handling disinfectants and medical devices.
- Wear appropriate Personal Protective Equipment (PPE).
- Do not use if the Wipe sachet is damaged or the Wipe is discoloured, damaged or dry.
- Keep the empty Wipe sachets to complete the Tristel Quality Audit Trail Record Book at the end of the decontamination procedure.
- Continuous wiping of the surface is not necessary and should be avoided to prevent shedding of the Wipe.
- For professional use only.
- These Instructions for Use (IFU) should be used in conjunction with the product label, Safety Data Sheet (SDS) and device manufacturer's instructions.
- Do not use past the expiry date.

The third and final step in the decontamination procedure is rinsing of the medical device. The Rinse Wipe is impregnated with de-ionised water and a low-level of antioxidant which removes chemical residues from a surface. Each Rinse Wipe sachet is packed and then sterilised by gamma-irradiation.

The Rinse Wipe is CE Marked as a Class I Sterile Device (MDD 93/42 EEC).

**STEP 1**

Take one Rinse Wipe sachet.

STEP 2

Remove the Wipe from its sachet and lay it out in the palm of your hand.

STEP 3

Wipe the surface of the device that has been decontaminated to remove excess foam.

STEP 4

Discard the used Wipe and gloves in accordance with local regulations. Do not reuse. Keep the empty Wipe sachet for traceability.

Note: Upon completion of the decontamination cycle the device should be left to air dry. Store the device in accordance with hospital protocols to prevent damage or recontamination.

Please complete the Tristel Quality Audit Trail Record Book to keep record of the decontamination procedure.

Manufactured by: Tristel Solutions Limited
Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire CB8 7NY
T +44 (0)1638 721500 - F +44 (0)1638 721911 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Desinfizieren Sie Ihre Hände und tragen Sie Handschuhe beim Umgang mit Desinfektionsmitteln und Medizinprodukten.
- Tragen Sie persönliche Schutzkleidung (PSA).
- Bitte verwenden Sie die Tücher nicht, wenn die Tuchverpackung beschädigt ist oder das Tuch verfärbt, beschädigt oder trocken ist.
- Sofern Sie das Protokollbuch verwenden, heben Sie die leeren Tuchverpackungen bis zur Beendigung des Aufbereitungsprozesses auf.
- Kontinuierliches Wischen auf der Oberfläche ist nicht erforderlich und sollte unterlassen werden, um ein Auseinanderreißen des Tuchs zu vermeiden.
- Nur für den professionellen Gebrauch.
- Diese Gebrauchsanleitung sollte in Verbindung mit dem Produktetikett, dem Sicherheitsdatenblatt (SDB) und den Anweisungen des Medizinprodukteherstellers verwendet werden.
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.

Der dritte Schritt im Aufbereitungsprozess ist das Abspülen des Medizinprodukts. Das Rinse Wipe ist mit entionisiertem Wasser und einer geringen Menge eines Antioxidans getränkt, das chemische Rückstände von Oberflächen entfernt. Jedes Rinse Wipe ist einzeln verpackt und durch Gammabestrahlung sterilisiert.

Das Rinse Wipe trägt das CE-Zeichen als Sterilprodukt der Klasse I (Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG).

**SCHRITT 1**

Nehmen Sie eine Rinse Wipe Verpackung.

SCHRITT 2

Entnehmen Sie das Tuch und breiten Sie es auf Ihrer Handfläche aus.

SCHRITT 3

Wischen Sie die Oberfläche des desinfizierten Medizinprodukts ab, um Schaumrückstände zu entfernen.

SCHRITT 4

Entsorgen Sie das gebrauchte Tuch und die Handschuhe gemäß den geltenden Bestimmungen. Nicht wiederverwenden. Bewahren Sie die leere Tuchverpackung auf, um das Protokollbuch auszufüllen.

Hinweis: Nach Abschluss des Aufbereitungsprozesses sollte das desinfizierte Medizinprodukt trocknen. Bewahren Sie das Medizinprodukt entsprechend den örtlichen Vorschriften auf, um Beschädigungen oder Rekontaminationen zu vermeiden.

Führen Sie das zugehörige Tristel Protokollbuch gewissenhaft, um alle Aufbereitungen nachverfolgen zu können.

Hersteller: Tristel Solutions Ltd
Vertrieb in Deutschland: Tristel GmbH, Karl-Marx-Allee 90A, 10243 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226 - F +49 (0)30 54819232 - E Vertrieb@tristel.com
Vertrieb in der Schweiz: Tristel AG, Sandgrube 29, CH-9050, Appenzell
T +41 (0)71 5670658 - E Schweiz@tristel.com

Tristel™

WE HAVE CHEMISTRY.



Tristel Solutions Limited; Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY
T +44 (0)1638 721500 - F +44 (0)1638 721911 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Australian sponsor: Tristel Pty Ltd. 40/328 Reserve Road, Cheltenham, VIC 3192, Australia
T 1300 680 898 - E mail-au@tristel.com

The Tristel Rinse Wipes is classified under the Australian Register of Therapeutic Goods as a Class Is medical device, AUST R number: 173046.

For Tristel patent information please visit www.our-patents.info/tristel

Contact Tristel, your local distributor or visit www.tristel.com for supporting documents such as safety data sheets, microbiological test data and reports.



Tristel NV, Smallandlaan 14B,
2660 Antwerp, Belgium



RIN/098/4
December 2020