


NOTES

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Désinfectez-vous les mains, portez des gants et un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation de désinfectants et de dispositifs médicaux.
- Les recommandations relatives au port de l'EPI peuvent varier selon l'établissement. Veuillez suivre les consignes locales.
- Lors de la première utilisation de Tristel DUO ULT, appuyez deux à quatre fois sur la pompe pour l'amorcer.
- Nettoyez soigneusement les dispositifs médicaux avant de les désinfecter. La présence de souillures résiduelles réduit l'efficacité de tout désinfectant. Respectez le protocole de l'établissement et les instructions du fabricant du dispositif médical.
- Ne pas utiliser sur des métaux tendres ou des aciers inoxydables de qualité inférieure.
- Des cotons-tiges peuvent être utilisés pour appliquer Tristel DUO ULT sur les zones difficiles d'accès, telles que les creux ou les rainures.
- Ce poster doit être utilisé conjointement avec la notice d'utilisation (IFU), l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.
- Réservé aux professionnels de santé.

MODE D'EMPLOI

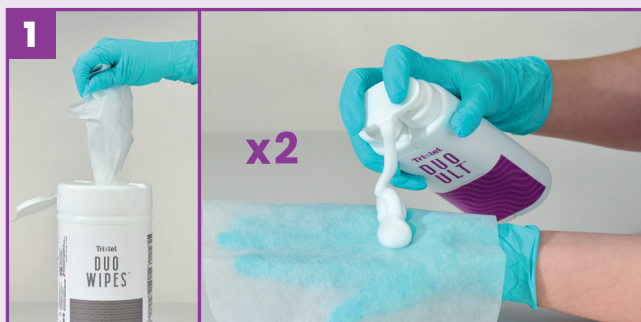

Déposez deux doses de Tristel DUO ULT sur une lingette sèche.

Remarque : Les lingettes DUO WIPES sont recommandées.



À l'aide de la lingette, étalez la mousse sur la surface de la sonde et du porte-sonde. Assurez-vous que toutes les zones sont bien recouvertes. Si nécessaire, utilisez un coton-tige pour faire pénétrer la mousse dans les rainures.

Remarque : Jetez la lingette conformément aux règles locales. Ne la réutilisez pas.



Veillez à ce que le dispositif reste humide pendant au moins 30 secondes de temps de contact. Laissez sécher à l'air libre.

Remarque : Rangez le dispositif médical conformément aux protocoles de l'établissement afin d'éviter tout dommage ou toute recontamination.