

### De complete oplossing voor een high-level desinfectie van invasieve medische hulpmiddelen zonder werkkanaal




Raadpleeg de gebruikershandleiding voor volledige instructies.

#### Opmerkingen:

- Volg altijd de ziekenhuisprotocollen en de instructies van de fabrikant op.
- Ontsmet handen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het omgaan met desinfecterende middelen en medische hulpmiddelen.
- Een eerste voorreiniging moet onmiddellijk na gebruik van het medisch hulpmiddel in overeenstemming met het ziekenhuisprotocol worden uitgevoerd.
- Bereid het ontsmettingsproces voor, door elk van de doekjes en het Activatorschuim uit de doos te nemen.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is en/of als de doekjes droog zijn.
- Gebruik, wanneer nodig, meer doekjes om zeker te zijn dat het instrument zichtbaar schoon is.
- Bewaar de zakjes van de gebruikte doekjes zodat de details kunnen worden ingevuld in het Tristel Quality Audit Trail Record Book.
- Gooi de doekjes en handschoenen weg in overeenstemming met de richtlijnen van het ziekenhuis.
- Alleen voor professioneel gebruik.

VOOR LARYNGOSCOPEN

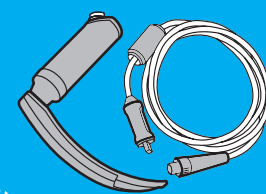

#### STAP 1 : REINIGEN



Neem het Reinigingsdoekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Veeg het instrument schoon om al het zichtbare vuil te verwijderen.

Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg als klinisch afval.

Ontsmet de handen en draag nieuwe handschoenen.

#### STAP 2a + 2b : ACTIVEREN



Neem het Sporicide doekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Neem het Activatorschuim en breng twee doses aan op het doekje.

Verfrommel het doekje gedurende **15 seconden** om chloordioxide te genereren.

Het gehele doekje dient met schuim bedekt te zijn.

#### STAP 2 : HIGH-LEVEL DESINFECTIE



Ontsmet het instrument zodat alle oppervlakken bedekt zijn met schuim.

Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg als klinisch afval.

Observeer een minimum contacttijd van **30 seconden**.

#### STAP 3 : NASPOELEN



Neem het Spoeldoekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Gebruik dit Spoeldoekje om het overtollig schuim te verwijderen van het instrument.

Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg als klinisch afval.

#### STAP 4 : TRACEREN



Verwijs naar de gebruikte zakjes van de Tristel doekjes en het Activatorschuim om het Record Book in te vullen.