





FUSE is een krachtig desinfectiemiddel gebaseerd op Tristel's unieke chloordioxide (ClO_2). De éénvormige verdunningsverhouding én contacttijd verminderen het risico op fouten.

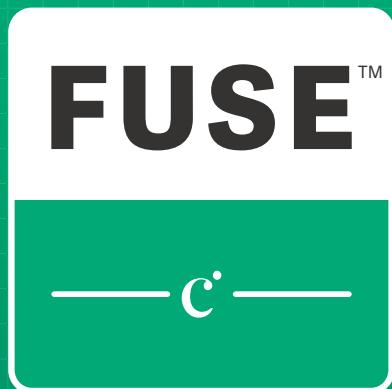

WERKZAAM IN 5 MINUTEN

Eliminatie van bacteriële sporen, mycobacteriën, virussen, schimmels, gisten en bacteriën in 5 minuten.

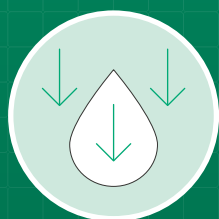

SPORICIDE BIJ LAGE CONCENTRATIE

Lagere concentratieniveaus dan bij chloor en perazijnzuur en zonder verschillende verdunningspercentages noch variabele contacttijden.



CONFORM EN 14885

Onafhankelijk getest en geverifieerd om te voldoen aan het Europese normenkader EN 14885, inclusief sporicide werking: EN 17126 en EN 17846.



SNEL, EENVOUDIG

Doe de centrale verzegeling van het zakje barsten, laat 5 minuten reageren, en verdun dan de inhoud in 5 liter water. De ClO_2 werkoplossing is dan klaar voor gebruik! Meteen de juiste dosering en contacttijd.



UNIFORM

5 minuten activering (reactietijd)
5 liter oplossing
5 minuten contacttijd


Meer over
FUSE



TOEPASSINGEN

Voor gebruik op vloeren, muren en andere harde, niet-poreuze oppervlakken, waaronder :



- ✓ Operatietafels
- ✓ Toiletstoelen
- ✓ Couveuses
- ✓ Infuus-steunen
- ✓ Patiëntenwagens
- ✓ Ziekenhuismatrassen en bed chassis
- ✓ Deuren
- ✓ Bevallingsbaden
- ✓ Ambulances

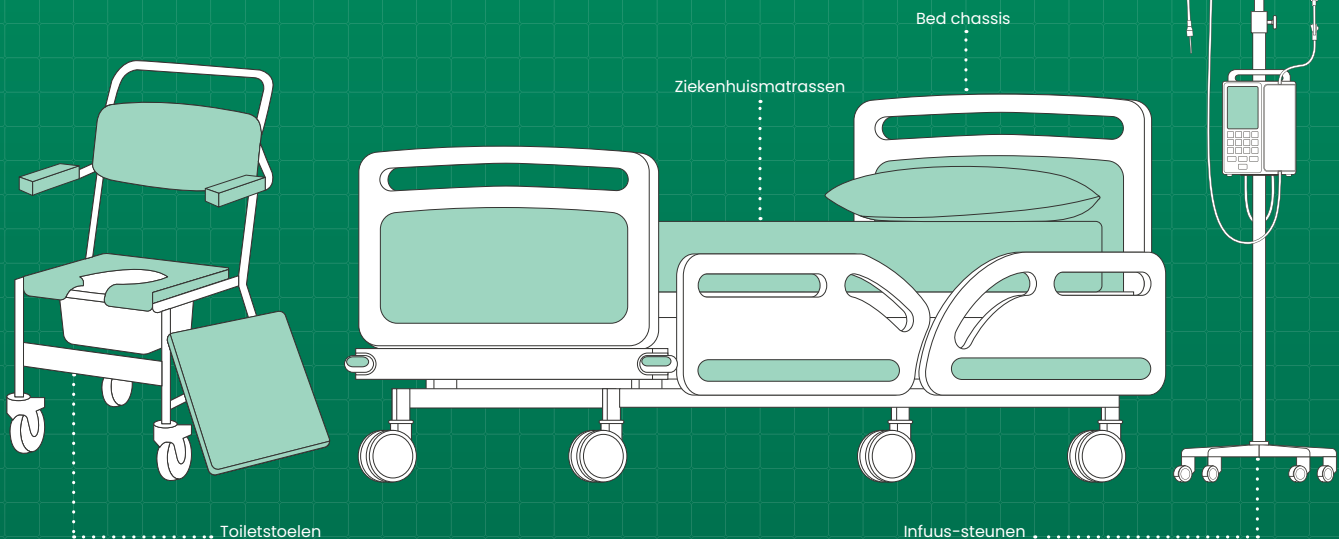


TRISTEL'S UNIEKE CHLOORDIOXIDE (ClO_2)

FUSE is gebaseerd op dezelfde chloordioxide (ClO_2) expertise als voor de Tristel-producten ontworpen voor de desinfectie van medische hulpmiddelen. Tristel ClO_2 is een krachtig oxidatiemiddel. Door de werking ervan kunnen micro-organismen geen resistentie tegen dit desinfectiemiddel ontwikkelen.

- ✓ Bevat geen ethanol noch quaternaire ammoniumverbindingen (QAC's)
- ✓ Bevat geen hormonale ontregelaars of stoffen die kankerverwekkend, mutageen of toxisch blijken bij voortplanting (CMR)
- ✓ Elimineert natte als droge biofilm
- ✓ Niet toxisch voor embryo's en spermatozoïden in IVF toepassingen (MEA & SMA getest)

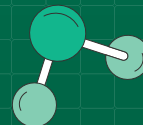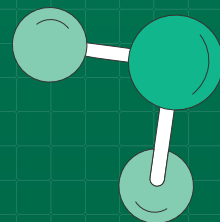

VOORDELEN VAN TRISTEL'S CHLOORDIOXIDE

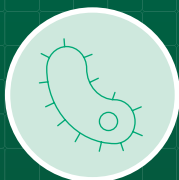

Breed spectrum



Snelle werking



Gebruiksgemak



Reinigende eigenschappen



Voorkomt antimicrobiële resistentie



Degradeert in zouten en water

BESTELINFORMATIE

CCH080101 **FUSE** (40 zakjes)

Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie.
Registratienummer biocide: BE-REG-01837.

