




FUSE is een krachtig desinfectiemiddel op basis van Tristels unieke chloordioxide (ClO_2). De uniforme verdunningsverhouding en contacttijd verminderen het risico op fouten.



WERKZAAM IN 5 MINUTEN

Werkzaam tegen bacteriële sporen, mycobacteriën, virussen, schimmels, gisten en bacteriën binnen 5 minuten.

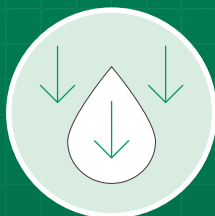

SPORICIDE BIJ LAGE CONCENTRATIE

De minimale inhiberende concentratie (MIC) ligt lager dan die van chloor en perazijnzuur, zonder dat meervoudige verdunningen of complexe contacttijden nodig zijn.




CONFORM EN 14885

Onafhankelijk getest en geverifieerd om te voldoen aan het Europese normenkader EN 14885, inclusief sporicide werking: EN 17126 en EN 17846.



SNEL, EENVOUDIG

Het volstaat om de centrale verzegeling van het zakje te breken, 5 minuten te wachten en de inhoud vervolgens te verdunnen in 5 liter water om de ClO_2 -oplossing te verkrijgen. Tellen, wegen en complexe berekeningen zijn niet nodig.

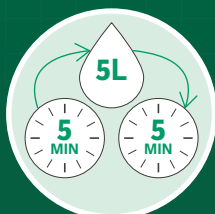

UNIFORM

5 minuten activering (reactietijd)
5 liter water
5 minuten contacttijd


Meer over
FUSE



TOEPASSINGEN

Voor gebruik op vloeren, muren en andere harde, niet-poreuze oppervlakken, waaronder :



- ✓ Medische oppervlakken in operatiekamers
- ✓ Toiletstoelen
- ✓ Incubatoren
- ✓ Infuuspalen en -houders
- ✓ Brancards
- ✓ Ziekenhuismatrassen en bedframes
- ✓ Deuren
- ✓ Bevallingsbaden
- ✓ Ziekenwagens

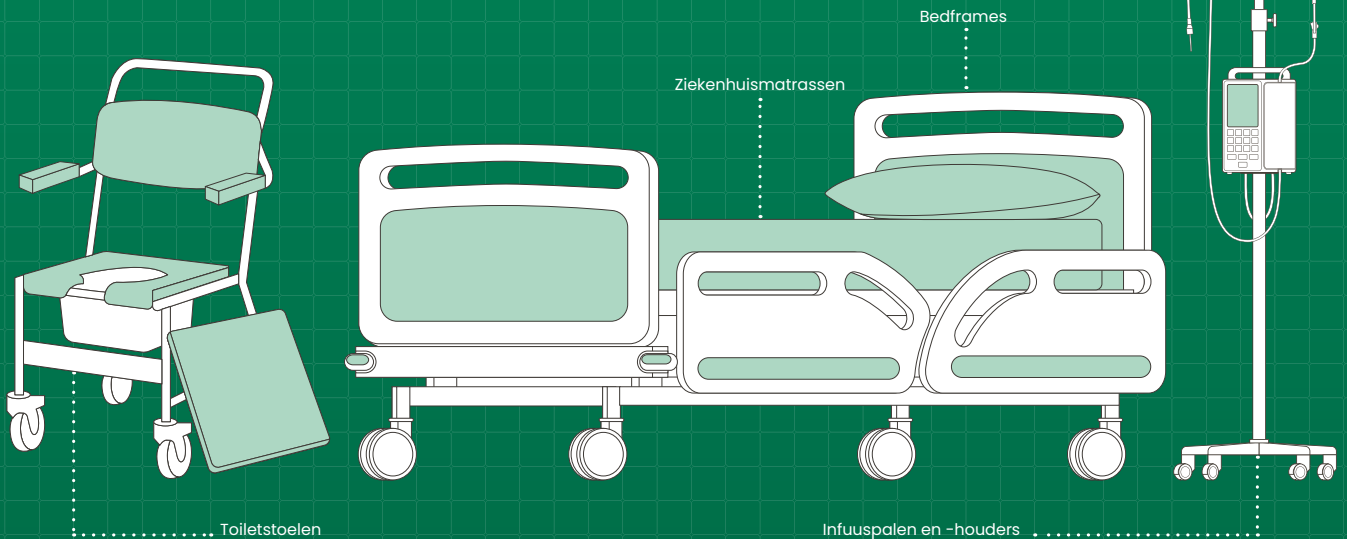


TRISTELS UNIEKE CHLOORDIOXIDE (ClO₂)

FUSE is ontwikkeld op basis van dezelfde chemie als de Tristel producten voor de desinfectie van medische hulpmiddelen: chloordioxide (ClO₂). Tristel ClO₂ is een krachtig oxidatiemiddel. Door de werking ervan kunnen micro-organismen geen resistentie tegen dit desinfectiemiddel ontwikkelen.

- ✓ Bevat geen ethanol noch quaternaire ammoniumverbindingen (QAC's)
- ✓ Bevat geen hormonale ontregelaars of stoffen die kankerverwekkend, mutageen of toxisch blijken bij voortplanting (CMR)
- ✓ Verwijdert zowel natte als droge biofilm
- ✓ Niet toxisch voor embryo's en spermatozoïden in IVF toepassingen (MEA & SMA getest)

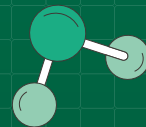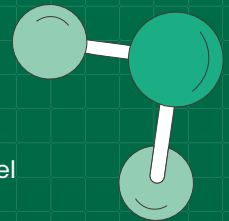

VOORDELEN VAN TRISTELS CHLOORDIOXIDE

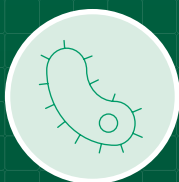

Breed spectrum



Snelle werking



Gebruiksgemak



Reinigende eigenschappen



Voorkomt antimicrobiële resistentie



Degradeert in zouten en water

BESTELINFORMATIE

CCH080101 **FUSE** (40 zakjes)

FUSE is een sporicide desinfectiemiddel dat is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel van klasse IIa volgens de EU MDR en als biocide. Registratienummer: BE REG 01837. Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie.

