



3T

Traçabilité digitale pour les soins médicaux



La plateforme 3T

Alternative aux livres d'audit sur papier, la 3T a été conçue pour être une plateforme de conformité basée sur le cloud complète.

La combinaison d'une application mobile intuitive à utiliser lors de l'administration des soins et d'un portail Web interactif offre aux utilisateurs de précieux outils de conformité en matière de décontamination.

La 3T guide les utilisateurs à travers toutes les étapes du processus, suit les événements de décontamination et les rend accessibles en temps réel au sein de leurs organisations. Cette démarche permet aux administrateurs et aux responsables de la décontamination de s'assurer non seulement que la décontamination a lieu aux intervalles appropriés, mais que les utilisateurs suivent le processus exact chaque fois.

Les données des opérations de désinfection sont stockées en toute sécurité dans le cloud et peuvent être consultées à tout moment sur le portail web. Des tableaux de bord permettent aux administrateurs de visualiser et de personnaliser des rapports pour maintenir un système de management de qualité élevé dans tous les départements.





Comment la 3T fonctionne

La traçabilité digitale

Tracer - Enregistrement des opérations de désinfection


Suivez facilement et efficacement les événements de décontamination à l'aide de l'application mobile intuitive 3T. Il vous suffit de numériser vos produits Tristel 3T et de créer un dossier de conformité unique.

Vérifier - État des dispositifs médicaux


Idéal pour les contrôles ponctuels ou les audits formels de l'état de décontamination des dispositifs médicaux d'une organisation. La 3T permet aux utilisateurs de numériser ou de rechercher rapidement un dispositif aux fins de contrôle, avant d'afficher son état actuel et les événements de décontamination les plus récents.

Consulter - Opérations de désinfection


En utilisant l'application mobile ou le portail Web, la 3T permet aux utilisateurs de passer en revue les événements de décontamination réalisés au moyen du journal de désinfection. Ce journal peut être parcouru et/ou soumis à un filtre pour fournir une vue personnalisée et permettre aux utilisateurs d'analyser les données.

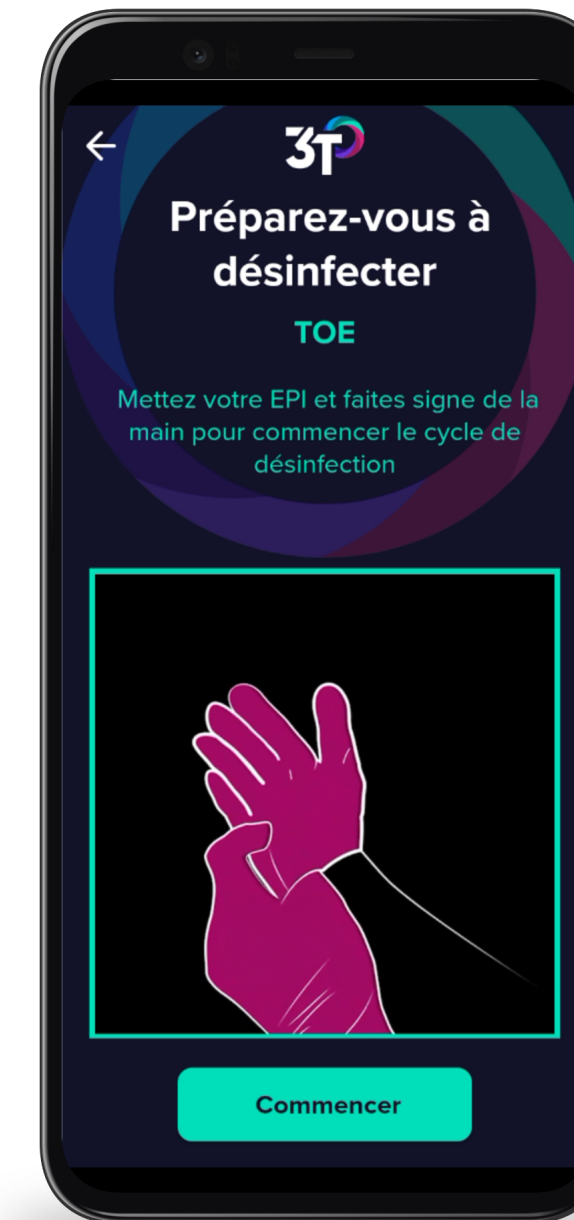

Exemple: Commencer

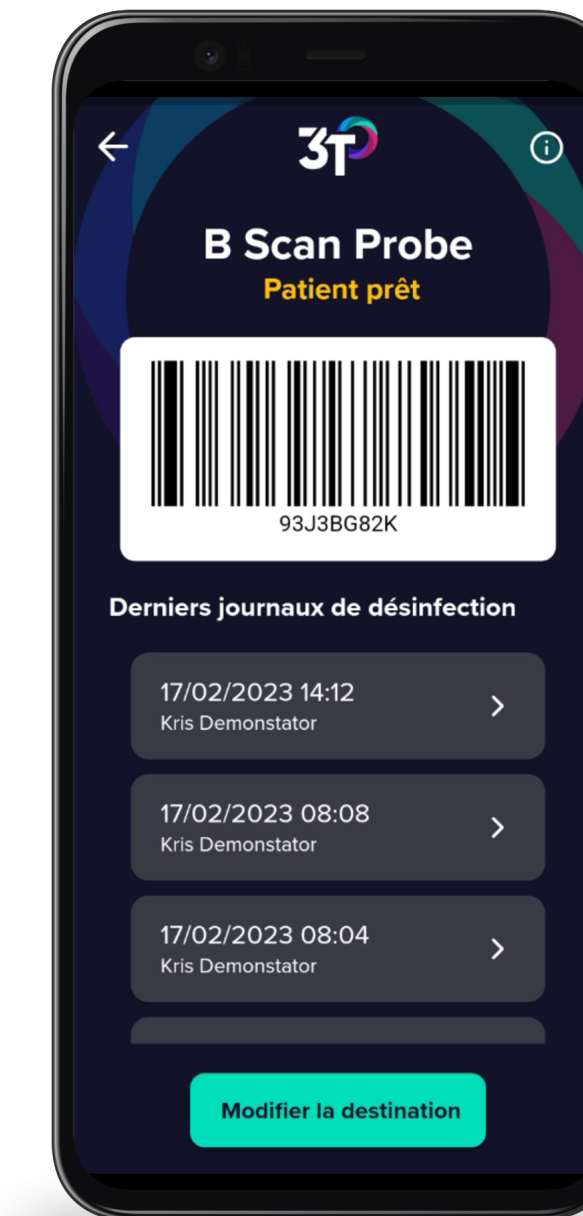

Exemple: Vérifier

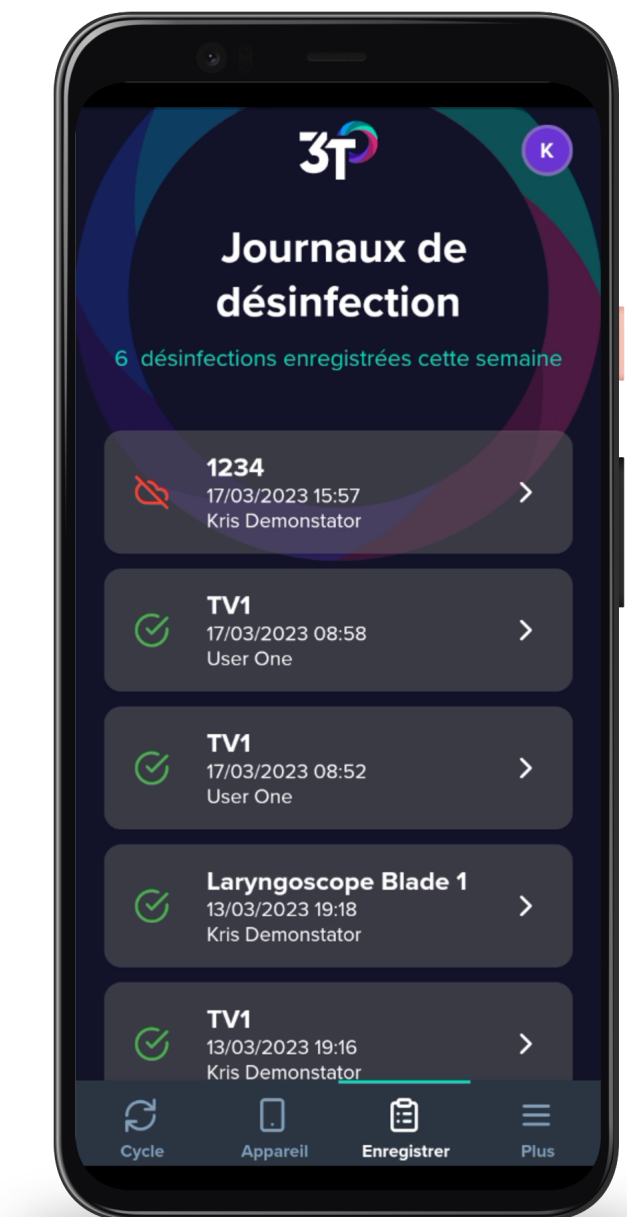

Exemple: Consulter




Fonctionnalités

Administration

Grâce à un portail Web interactif, la 3T offre aux administrateurs de l'organisation la liberté de configurer et de maintenir la plateforme de manière simple et rapide, en fonction des besoins actuels et futurs.

Tous les éléments du portail sont hébergés dans le cloud et accessibles en toute sécurité partout, sans qu'il soit nécessaire d'installer un logiciel.

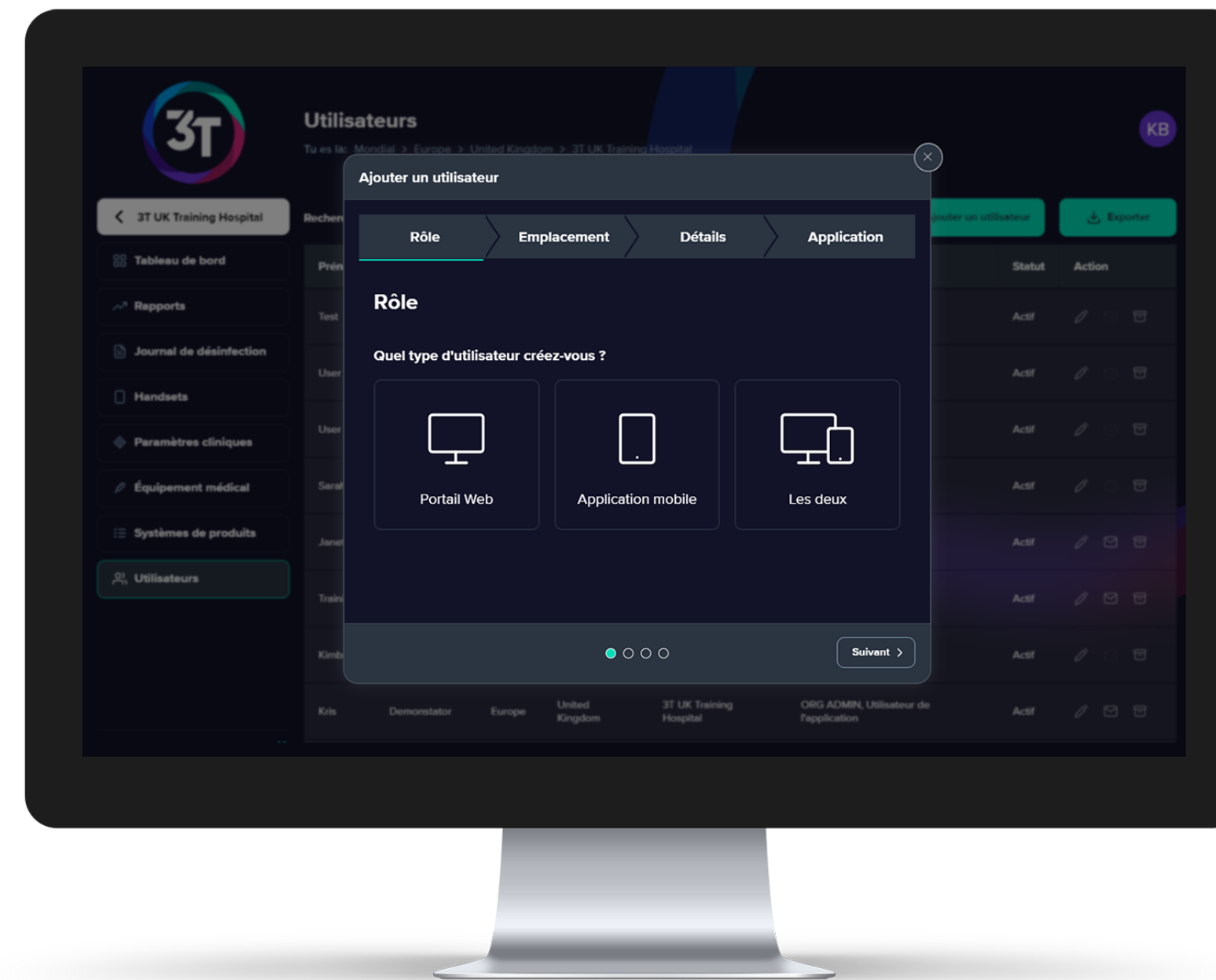

✓ Utilisateurs

La gestion des membres de l'équipe, l'ajout ou l'intégration de nouveaux utilisateurs sont simples et efficaces, puisque les administrateurs peuvent s'en charger eux-mêmes.

✓ Dispositifs médicaux

Ajoutez/modifiez et gérez l'emplacement de tous les dispositifs médicaux pris en charge par la 3T au sein de l'organisation. Les ID des dispositifs peuvent être convertis en codes QR pour une numérisation de « démarrage rapide ».

✓ Salles d'examen

Segmentez et surveillez chaque environnement clinique en configurant l'organisation à partir d'une liste de départements cliniques, les dispositifs médicaux étant affectés à chacun d'entre eux.

✓ Protocoles produits

Utilisez les systèmes de produits standard de Tristel ou créez des systèmes complets sur mesure adaptés aux exigences de décontamination de vos propres dispositifs médicaux.





Fonctionnalités

Tableaux de bord

Utilisées principalement comme outil d'enregistrement des cycles de décontamination, les données générées par les utilisateurs de la 3T constituent un atout inestimable pour les prestataires de soins de santé.

Les tableaux de bord offrent aux principales parties prenantes un moyen de visualiser de manière conviviale et efficace les interactions entre les utilisateurs et leur utilisation des produits, des dispositifs médicaux et des environnements cliniques.



✓ Résumés statistiques

Visualisez des captures d'écran d'informations liées à l'organisation et à son utilisation globale de la 3T.

✓ Graphiques d'utilisation

Observez les tendances en matière de dispositifs médicaux, de cycles de désinfection et d'autres données sauvegardées par 3T.

✓ Journal de contrôle

Visualisez l'utilisation qui est faite de la plateforme via le journal des activités. Toutes les actions réalisées sur la 3T dans l'établissement y sont consignées : les modifications des journaux de désinfection, des utilisateurs et des dispositifs.

✓ Données détaillées

Si les résumés statistiques et graphiques d'utilisation ne sont pas suffisamment détaillés, les administrateurs peuvent examiner les données de manière plus approfondie.



Fonctionnalités

Scan

La 3T minimise les interactions manuelles. L'application mobile utilise l'approche "scan" pour plus de rapidité, de la connexion initiale à l'enregistrement des données sur les dispositifs médicaux ou les produits Tristel.

✓ Connexion à l'établissement

Les utilisateurs peuvent connecter rapidement leur portable à la 3T et à l'établissement en scannant le code QR fourni par le portail web 3T.

✓ Connexion de l'utilisateur


Les utilisateurs peuvent s'identifier en scannant leur code QR/ code-barres du personnel. Il leur suffit alors de saisir un code PIN à 4 chiffres pour se connecter.

✓ Sélection du dispositif médical

Dans les environnements cliniques où plusieurs dispositifs médicaux identiques sont disponibles, les utilisateurs peuvent scanner le code QR/ code-barres du dispositif ou le sélectionner dans le journal pour commencer.

✓ Données du produit

Chaque scan d'un produit Tristel permet l'enregistrement des données pertinentes liées à l'opération pour une utilisation des produits appropriés avec chaque dispositif et une vérification des dates de péremption. Des alertes sont émises si des anomalies sont détectées.

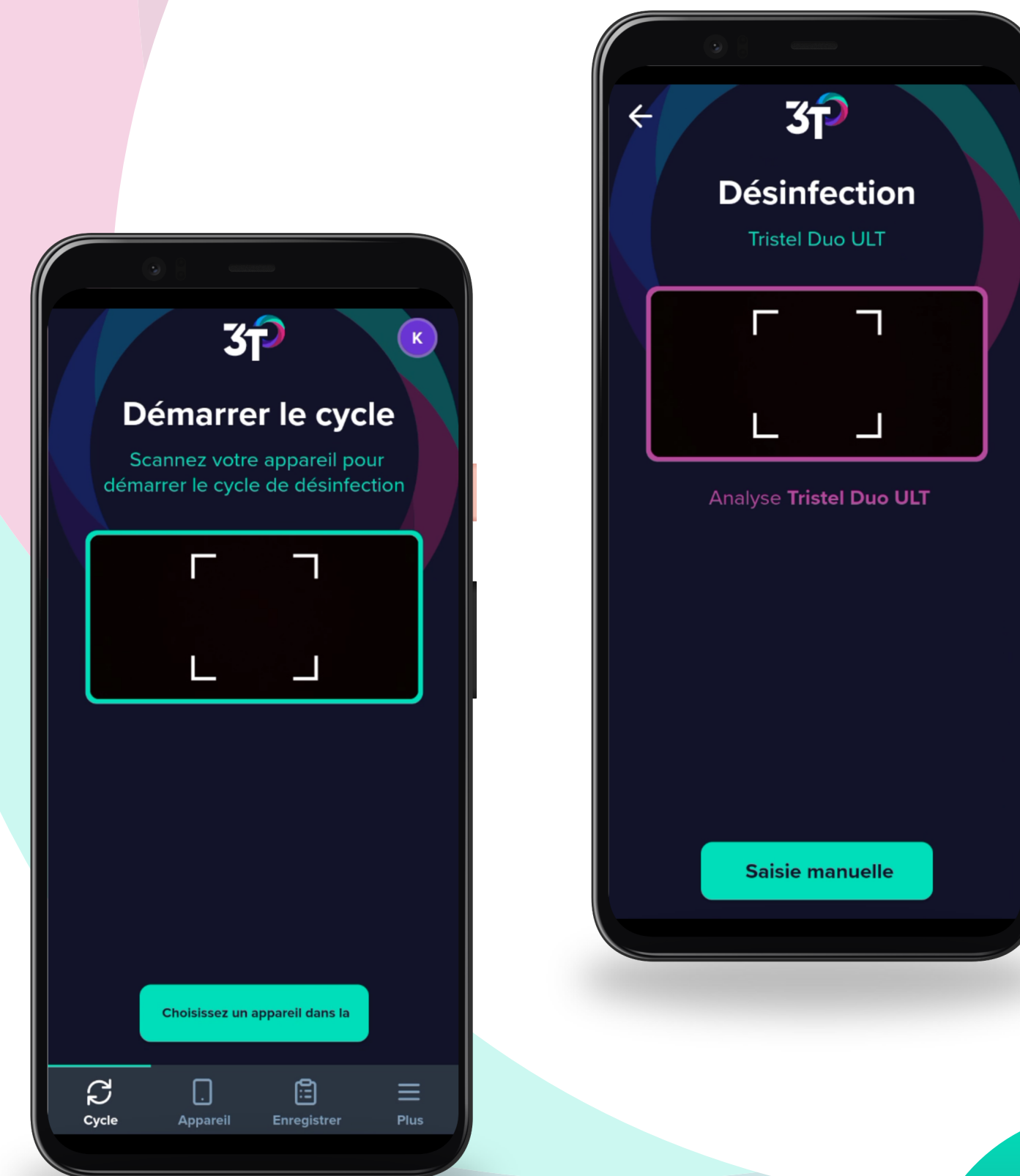



Fonctionnalités

Localisation

De même que les produits Tristel sont mondialement reconnus et largement utilisés, la 3T a été conçue pour couvrir les réglementations régionales et permettre une personnalisation complète.

✓ Langues

Afin de rendre la plateforme aussi conviviale que possible pour tous, chaque partie du portail Web et de l'application mobile est traduite au niveau de l'utilisateur. En d'autres termes, chaque utilisateur peut définir sa langue préférée dans son profil, laquelle est sauvegardée pour toute utilisation future.

✓ Serveurs

Afin d'offrir les niveaux de service les plus élevés, la 3T dispose de nombreux emplacements de serveurs basés sur le cloud à l'échelle mondiale. De ce fait, non seulement les données sont stockées dans des régions réglementées adéquates, mais la rapidité des plateformes est optimisée et stable.

✓ Utilisation conforme des produits

Pour faciliter l'utilisation conforme des produits Tristel (au niveau organisationnel, national ou régional), des éléments spécifiques et distincts tels que le temps de contact peuvent être facilement personnalisés pour veiller à ce que les parcours des utilisateurs dans l'application mobile correspondent aux meilleures pratiques/spécificités SOP.



— Ne tardez pas

Contactez-nous

via votre représentant commercial Tristel ou

✉ team@tristel.com

Pour plus d'informations, scannez le code QR :



3t.tristel.com

Fabriqué par: Tristel Solutions Ltd, Unit 1b, Lynx Business Park,
Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK