

Fuse™

for Medical Surfaces


**Das sporizide
Flächendesinfektionsmittel,
das wirklich performt!**

Eine Konzentration,
eine Einwirkzeit,
das ganze Wirkspektrum



SPORIZID IN 5 MINUTEN

Wirksam gegen bakterielle Sporen, Mykobakterien, Viren, Pilze, Hefen und Bakterien in einer einheitlichen Einwirkzeit.

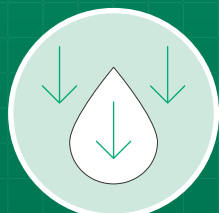

SCHON IN GERINGEN KONZENTRATIONEN WIRKSAM

Geringere Wirksamkeitsuntergrenzen für die sporizide Wirksamkeit als Chlor- oder Peressigsäure-basierte Desinfektionsmittel und keine verwirrenden Konzentrationen oder Einwirkzeiten.




KONFORM

Wirksamkeit in unabhängigen Laboren getestet und gemäß allen erforderlichen EU Normen bestätigt, inklusive der neuen EN 17846 Norm für Sporizidie.



SCHNELL UND EINFACH IN DER ANWENDUNG

Einfach das Päckchen aktivieren und nach 5 Minuten in 5 Liter Wasser geben. Kein Abzählen, Abwiegen, Abmessen oder Rechnen nötig!

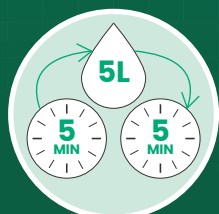

EINHEITLICH

5 Minuten Aktivierung
5 Liter Wasser
5 Minuten Einwirkzeit


Erfahren Sie mehr über
Fuse for Medical Surfaces



ANWENDUNGEN


Zur Nutzung auf Böden, Wänden und anderen festen und nicht-porösen Oberflächen, wie z.B.:

- ✓ Oberflächen in OPs
- ✓ Inkubatoren und Wärmebettchen
- ✓ Betten und Matratzen
- ✓ Bettpfannen
- ✓ Sanitäranlagen
- ✓ Infusionsständer
- ✓ Patiententische

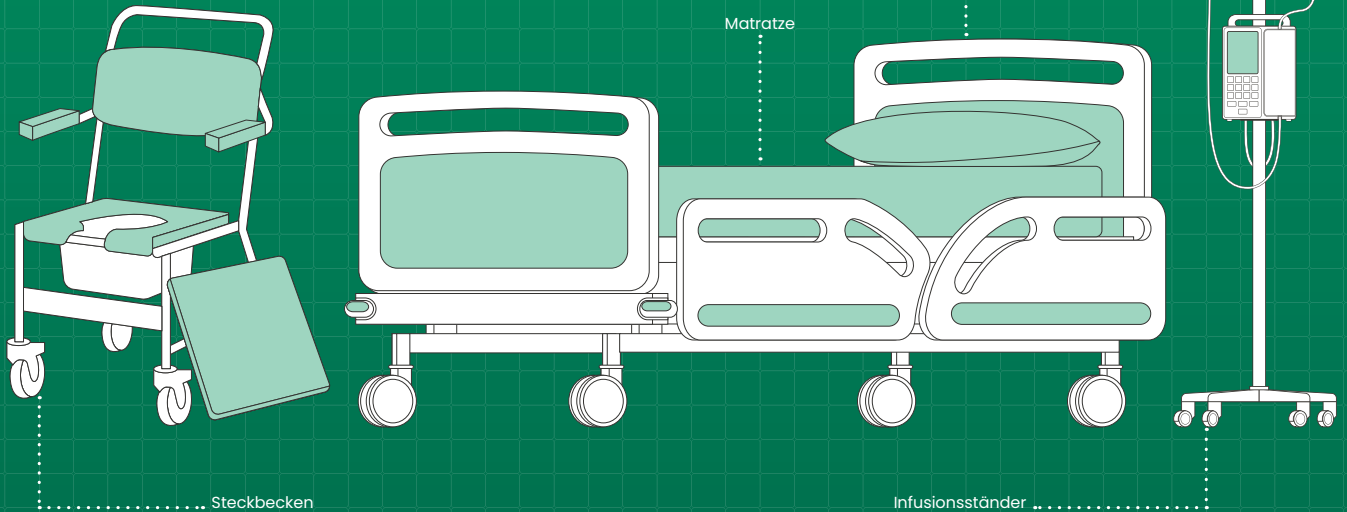


TRISTELS CHLORDIOXID (ClO₂)

Fuse for Medical Surfaces nutzt denselben Wirkstoff wie unsere anderen Tristel-Desinfektionsmittel für Medizinprodukte. Fuse besteht aus einem Päckchen mit zwei Kammern, welche die Basislösung (Zitronensäure) und die Aktivatorlösung (Natriumchlorit) enthalten. Wenn sie gemischt werden, entsteht Chlordioxid. ClO₂ zerstört pathogene Organismen durch Oxidation; dadurch können Mikroorganismen keine Resistenzen gegenüber Chlordioxid entwickeln. Zudem entfernt Chlordioxid mit der Zeit Biofilme und andere hartnäckige Ablagerungen von Oberflächen.

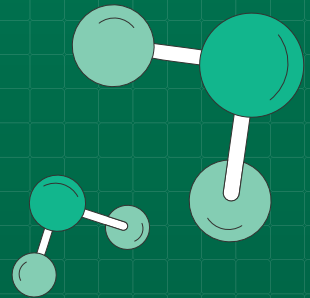

VORTEILE VON FUSE FOR MEDICAL SURFACES

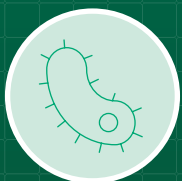

**Umfangreiches
Wirkspektrum**




**Schnell
wirkend**



**Einfach
anzuwenden**



**Reinigende
Eigenschaften**

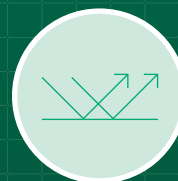

**Verhindert
antimikrobielle
Resistenzen**



**Zerfällt in Salz
und Wasser**

BESTELLINFORMATIONEN

Tristel Fuse for Medical Surfaces (40 Päckchen)

Elephant Jug (einzeln)

500ml Flasche (6 pro Karton)

