



3T

**Trazabilidad digital para
la atención médica**



Acerca de

La plataforma 3T

La Plataforma 3T proporciona una alternativa a los libros de registro en papel. Se ha desarrollado como una plataforma de compliance alojada en la nube con todas las funcionalidades necesarias.

Combinando una aplicación móvil intuitiva para su uso en el punto de atención con un portal web interactivo, ofrece a los usuarios herramientas de compliance de descontaminación inestimables.

3T guía a los usuarios a través de todos los pasos del proceso, rastreando eventos de descontaminación y disponibilizándolos para su visualización en tiempo real en toda su organización. Esto permite a los administradores y líderes de descontaminación asegurarse de que no solo se está llevando a cabo la descontaminación en los intervalos apropiados, sino que los usuarios siguen el proceso exacto cada vez.

Los datos agregados de todos los eventos de descontaminación se almacenan de forma segura en la nube y se pueden ver en cualquier momento a través del portal web. Los paneles interactivos permiten a los administradores ver y personalizar informes, lo que ayuda a mantener altos niveles de estándares de calidad y eficiencia en todos los departamentos.





Cómo funciona

Trazabilidad Digitalizada

Seguimiento: Registrar eventos de descontaminación


Seguimiento de eventos de descontaminación de manera fácil y efectiva utilizando la intuitiva aplicación móvil 3T. Simplemente escanee sus productos Tristel habilitados para 3T y cree un registro de cumplimiento único.

Comprobación: Estado de los dispositivos médicos


Perfecto para inspecciones rápidas o auditorías formales del estado de descontaminación de dispositivos médicos de una organización. 3T permite a los usuarios escanear o buscar rápidamente un dispositivo para realizar una comprobación antes de mostrar el estado actual y los eventos de descontaminación más recientes.

Revisión: De eventos de descontaminación


Usando la aplicación móvil o el portal web, 3T permite a los usuarios revisar eventos de descontaminación completados a través del registro de desinfección. Este registro se puede buscar y/o filtrar para proporcionar una vista personalizada que permita a los usuarios analizar los datos según sea necesario.

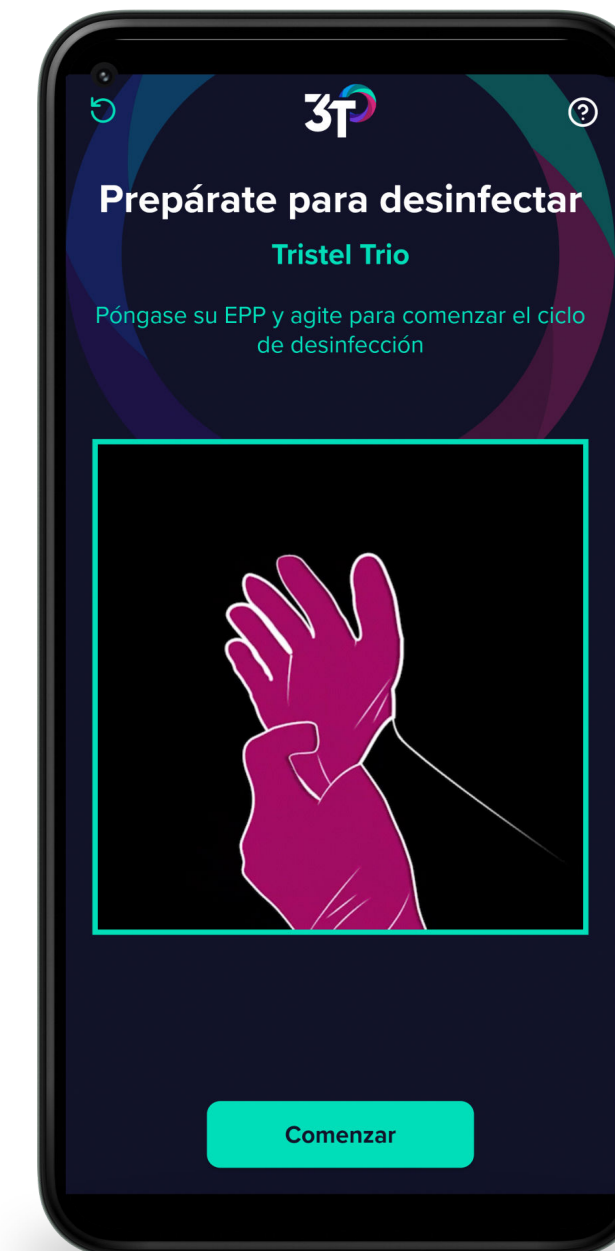

Ejemplo: Registro

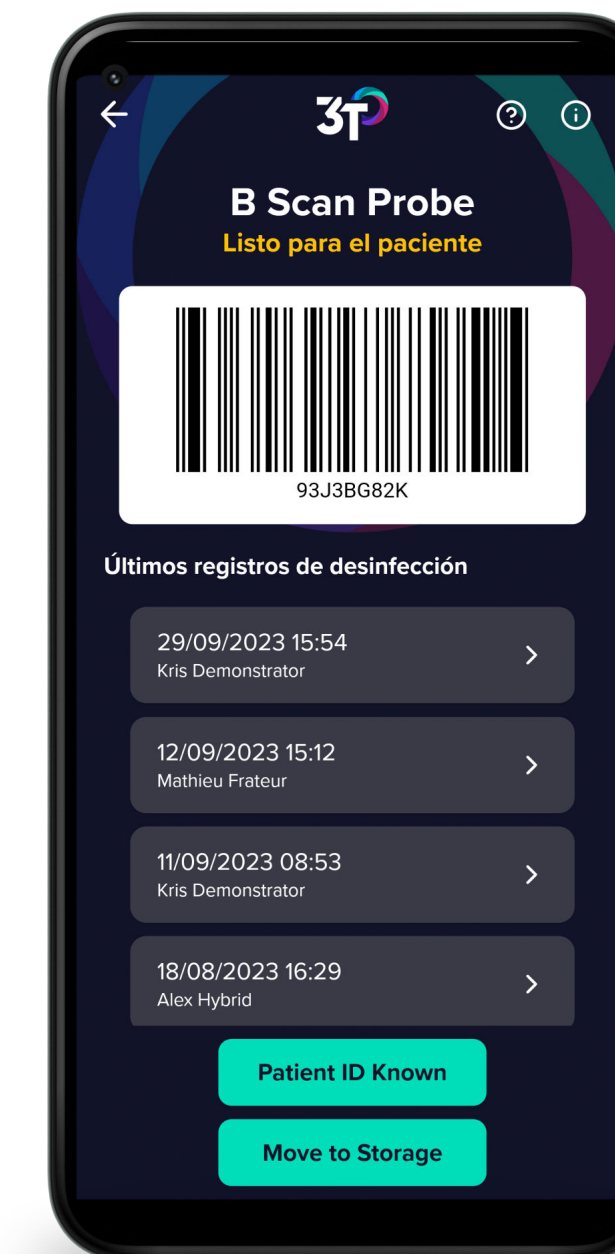

Ejemplo: Comprobación

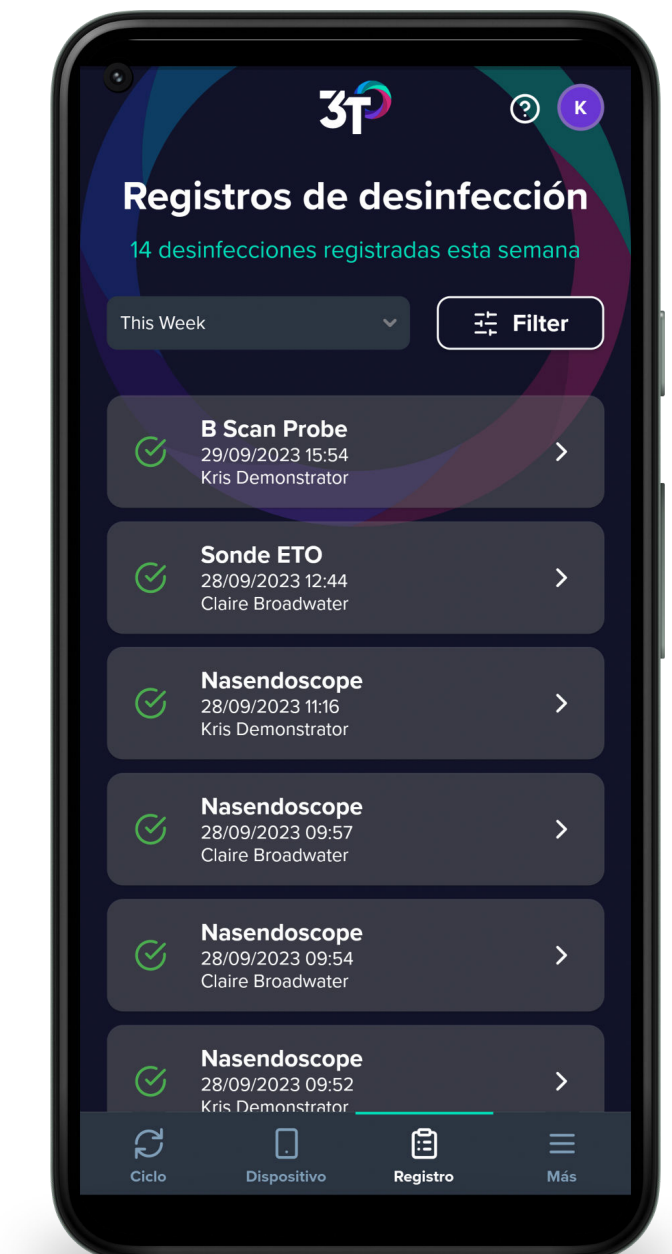

Ejemplo: Revisión




Funcionalidades

Administración

A través de un portal web interactivo, 3T proporciona a los administradores de la organización la autonomía para configurar y mantener la plataforma de manera rápida y sencilla para las necesidades presentes y futuras.

Todos los elementos del portal están basados en la nube y son accesibles de forma segura en cualquier lugar, sin necesidad de instalar software.

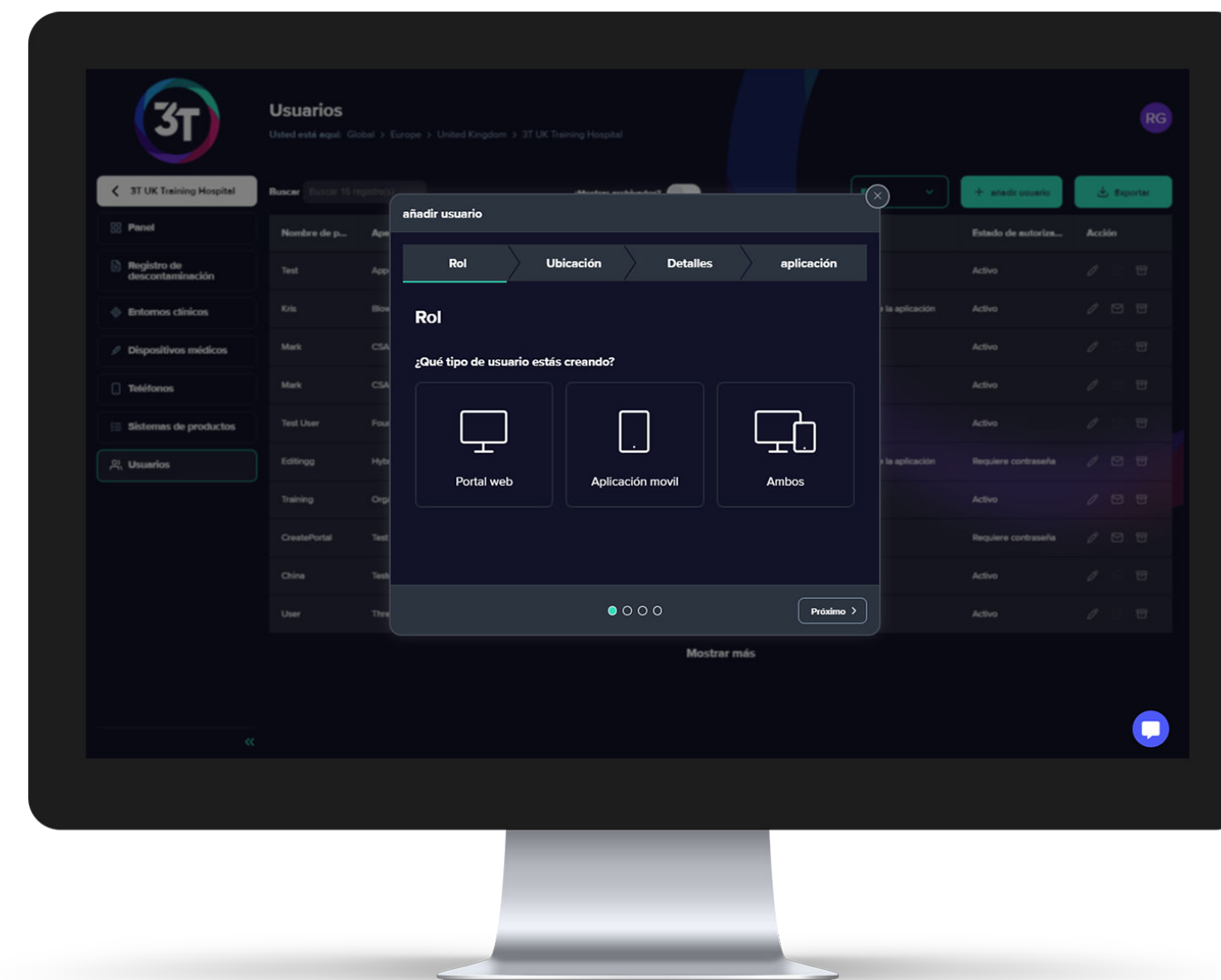

✓ Usuarios

La gestión de miembros del equipo y la incorporación de nuevos usuarios se simplifican y se vuelven efectivas, ya que los administradores pueden realizar esta acción ellos mismos.

✓ Dispositivos

Agregue, edite y gestione la ubicación de todos los dispositivos médicos procesados por 3T dentro de la organización. Las identificaciones de dispositivos se pueden convertir en códigos QR para escaneo de 'inicio rápido'.

✓ Entornos Clínicos

Segmentar y supervisar cada configuración clínica mediante la configuración de la organización a partir de una lista de departamentos clínicos, con asignación de dispositivos médicos a cada uno.

✓ Sistemas de productos

Utilice sistemas de productos Tristel estándar o cree sistemas personalizados completos adecuados para sus propios requisitos de descontaminación de dispositivos médicos.






Funcionalidades

Panel de control

Se utilizan principalmente como una herramienta para registrar ciclos de descontaminación, y los datos generados por los usuarios en 3T son un activo invaluable para los proveedores de atención médica.

Proporciona a las partes interesadas una forma de visualizar las interacciones de los usuarios y su uso de productos, dispositivos médicos y configuraciones clínicas de manera sencilla y efectiva.

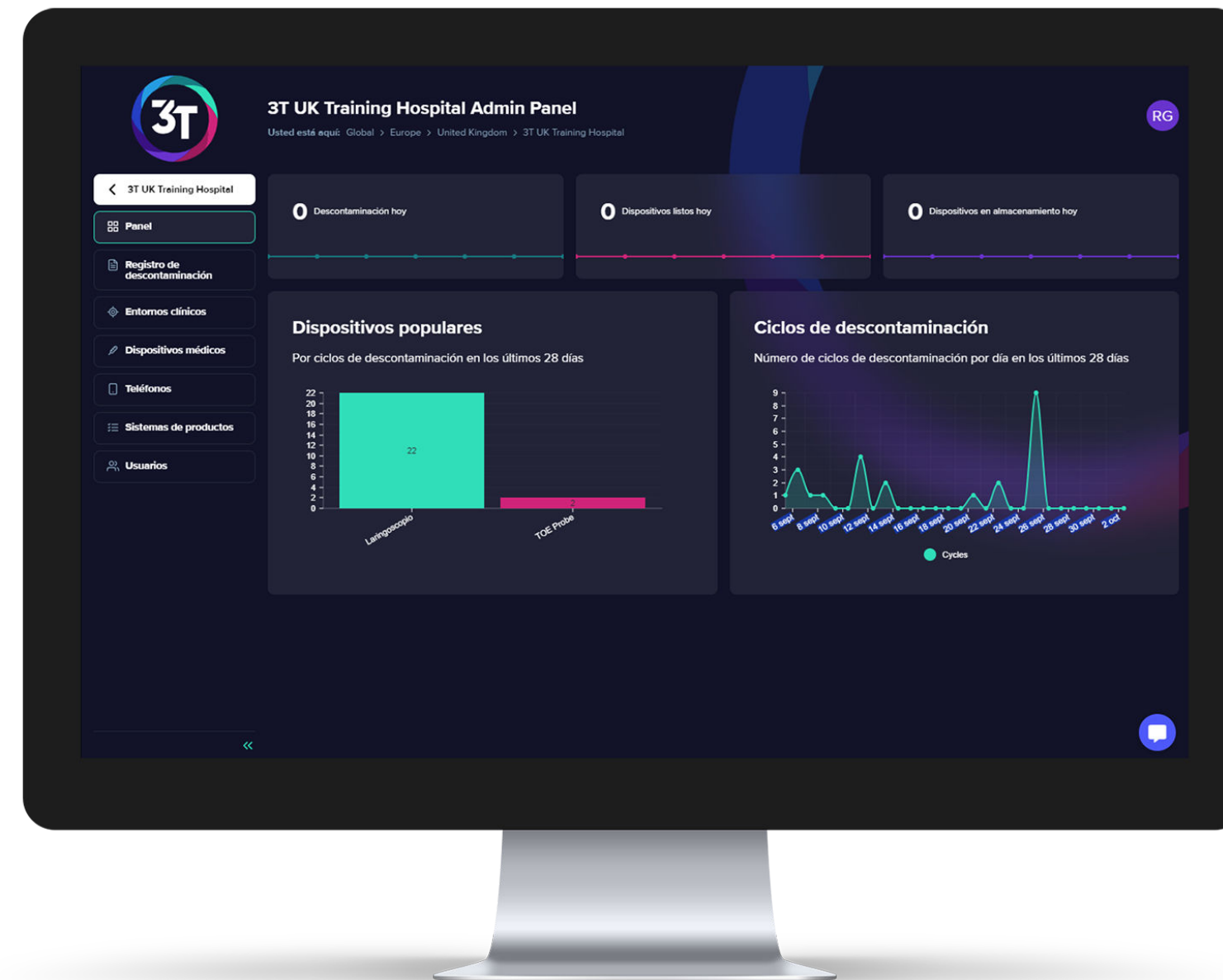

✓ Estadísticas resumidas

Vea una vista general de información clave relacionada con la organización y su uso de 3T.

✓ Gráficos de uso

Observe tendencias relacionadas con dispositivos médicos, ciclos de desinfección y otros datos capturados por 3T.

✓ Registro de auditoría

Controle el uso de la plataforma a través del registro de auditoría, donde se registra toda la actividad de 3T que tiene lugar en la organización, incluidos los cambios en los registros de descontaminación, usuarios y dispositivos.

✓ Datos detallados

Cuando las estadísticas resumidas o los gráficos de uso no son lo suficientemente detallados, los administradores pueden profundizar en los datos según sea necesario.





Funcionalidades

Escaneo

3T ha sido diseñado para minimizar pasos e interacciones manuales en el registro de datos. La aplicación móvil adopta un enfoque de “escaneo primero”, donde los usuarios pueden acelerar cada proceso, desde el inicio de sesión inicial hasta los datos de dispositivos médicos y productos Tristel.

✓ Conexión con la Organización

Al configurar un nuevo teléfono móvil para usarlo con 3T, simplemente escanea el código QR proporcionado en el portal web para conectarlo a tu organización en segundos.

✓ Selección de Dispositivos


En entornos clínicos de ritmo rápido donde hay múltiples dispositivos disponibles, seleccionar un dispositivo médico es tan simple como escanear su código QR o utilizar la búsqueda inteligente para encontrarlo antes de iniciar el ciclo de descontaminación.

✓ Inicio de Sesión de Usuario

Para facilitar el acceso, los usuarios pueden escanear su código QR/código de barras de personal para identificarse en la aplicación móvil. Desde aquí, solo se requiere un PIN de cuatro dígitos para completar el inicio de sesión.

✓ Datos del Producto

La funcionalidad que más tiempo ahorra en cada proceso. Cada escaneo de un producto Tristel habilitado registrará todos los datos relevantes para el evento. Así, no solo se están utilizando los productos correctos con cada dispositivo médico, sino que también tienen una fecha de caducidad válida, si se detecta un problema.

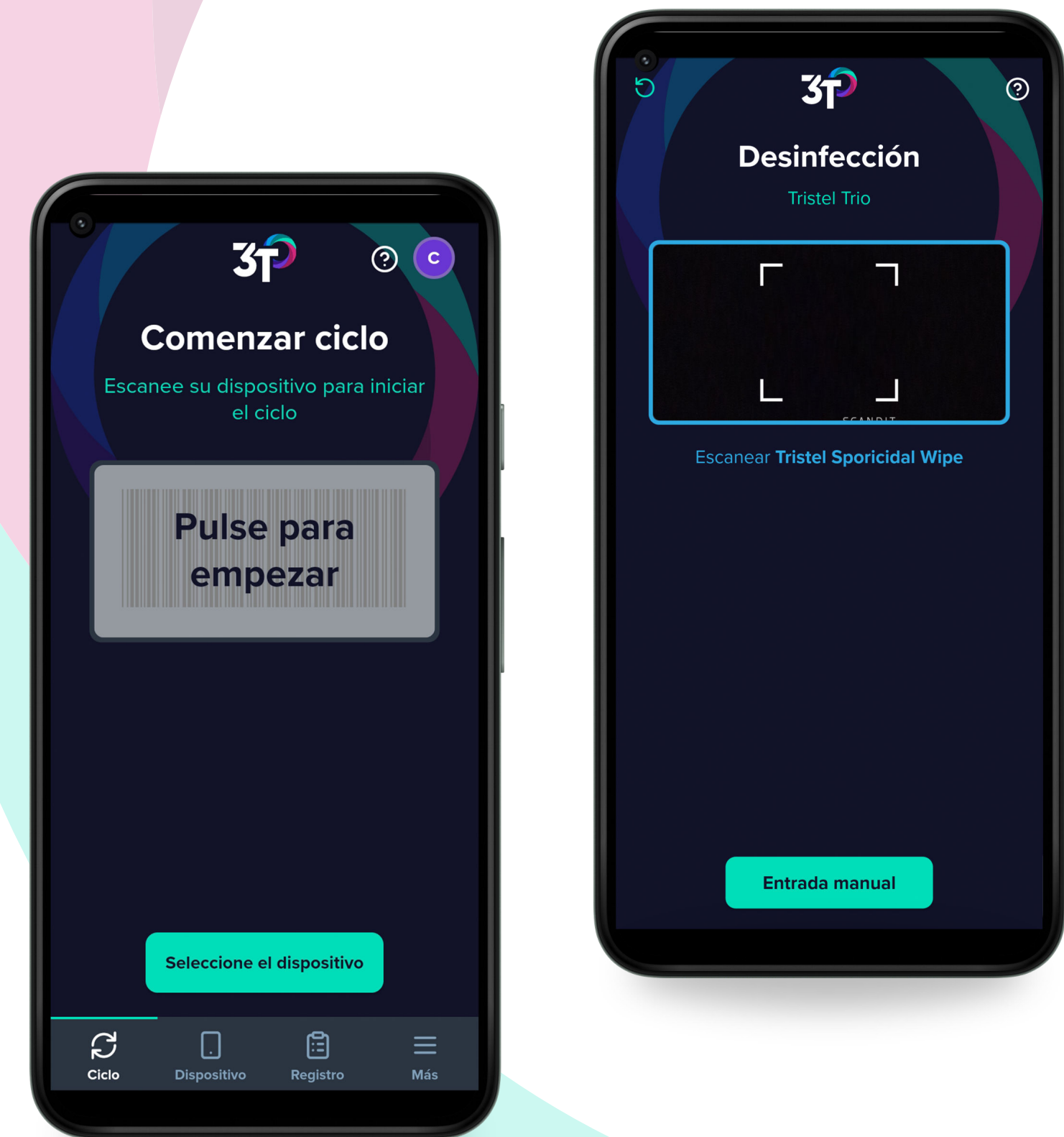



Funcionalidades

Localización

De la misma manera en que los productos Tristel son reconocidos a nivel global y ampliamente utilizados, 3T ha sido desarrollado para cumplir con las distintas regulaciones regionales y permitir una personalización completa.

✓ Idiomas


Con el objetivo de hacer la plataforma lo más amable posible para todos, cada área del portal web y la aplicación móvil se traduce a nivel de usuario. Esto significa que cada usuario puede establecer su idioma preferido en su perfil, que se guarda para todos los usos futuros.

✓ Servidores

Con el fin de ofrecer los más altos niveles de servicio, 3T tiene numerosas ubicaciones de servidores en la nube en todo el mundo. Esto asegura que los datos no solo se almacenan en regiones reguladas adecuadamente, sino que también se optimizan y mantienen velocidades de plataforma consistentes.

✓ Uso del Producto

Para ayudar con el uso conforme de los productos Tristel (a nivel organizativo, nacional o regional), elementos específicos y distintos como el tiempo de contacto se pueden personalizar fácilmente para garantizar que los procedimientos del usuario a través de la aplicación móvil correspondan a las mejores prácticas y procedimientos estándar específicos.

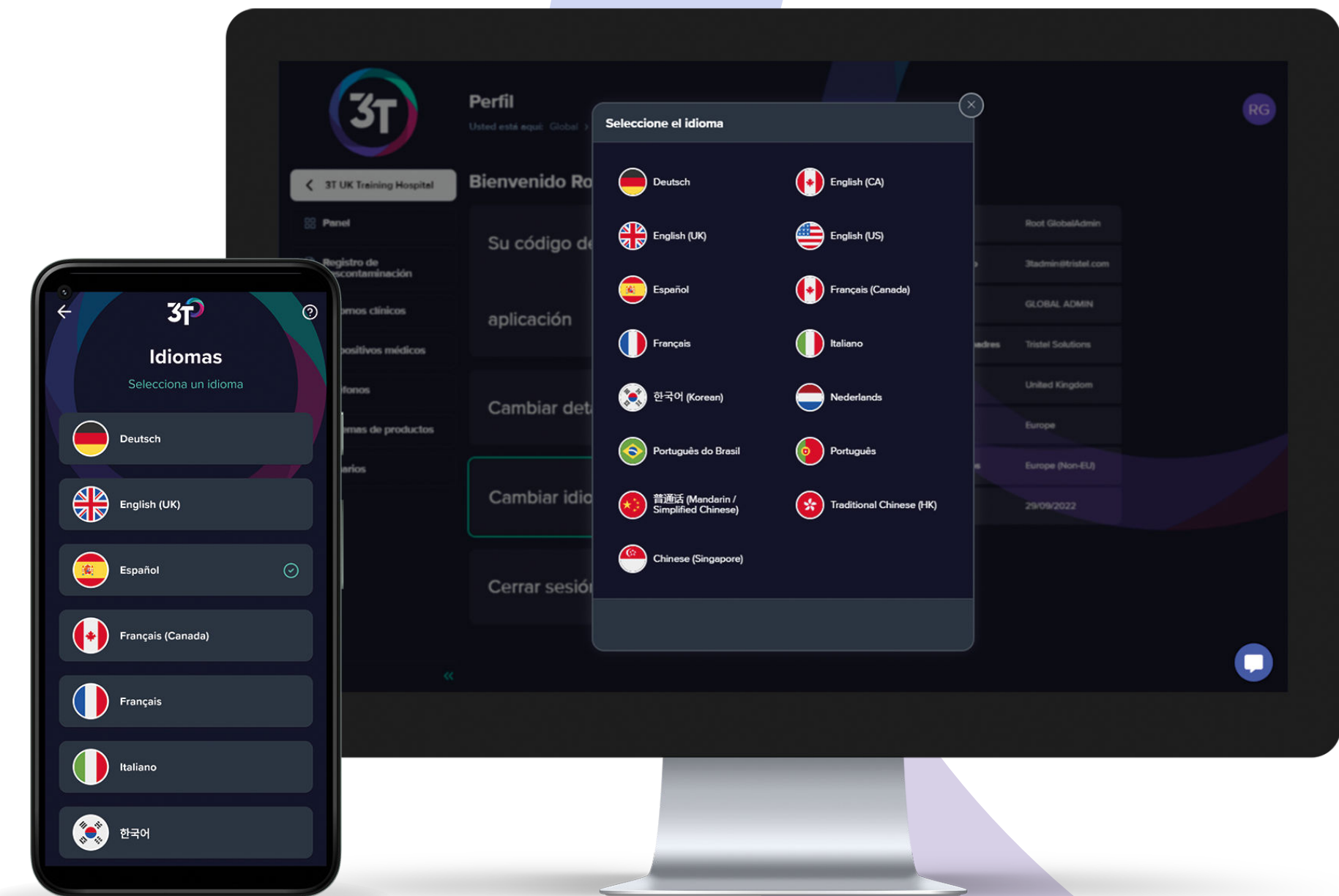

— No espere

Contáctenos

A través de su equipo de ventas de Tristel o:

✉ 3t@tristel.com

Para más información, escanee aquí:



3t.tristel.com