


Tristel Duo™

ULT



DESTRUYE LOS TIPOS 16 Y 18 DE VPH EN 30 SEGUNDOS CON TRISTEL DUO ULT.*

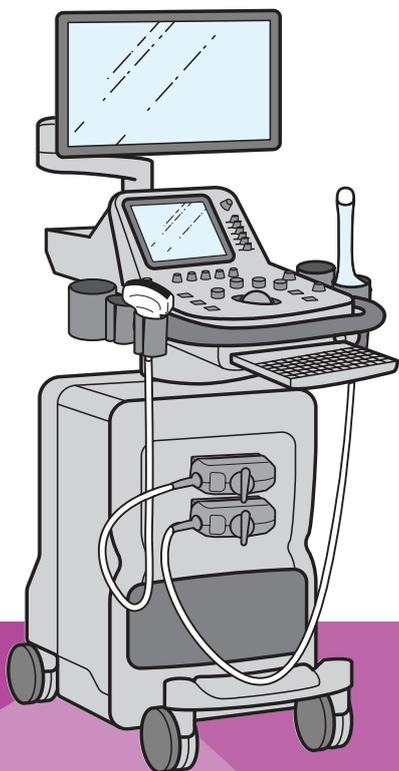

Existen más de 200 tipos diferentes del virus del papiloma humano (VPH). Los tipos 16 y 18 son responsables de aproximadamente el 70% de los casos de cáncer cervical. Un nuevo estudio científico de Meyers, et al. (2020) demuestra que Tristel Duo ULT posee eficacia contra los tipos infecciosos de VPH 16 y 18 en una sonda de ultrasonido transvaginal en 30 segundos.

Tristel Duo ULT es el único desinfectante de alto nivel que ha demostrado su eficacia contra VPH en 30 segundos, diseñado para tratar toda la estación de ecografía.

Tristel Duo ULT proporciona desinfección de alto nivel para sondas de ultrasonidos endocavitarias, sondas de ultrasonidos de superficie cutánea (incluyendo aquellos usados en procedimientos invasivos), portasondas, cables, enchufes, teclados, monitores e incluso dispositivos médicos móviles que combinan una sonda de ultrasonidos con un dispositivo inteligente.

Tristel Duo ULT es esporicida, micobactericida, virucida, fungicida y bactericida en un tiempo de contacto de 30 segundos. La desinfección rápida y eficaz de alto nivel con Tristel Duo ULT es vital para la prevención de infecciones en obstetricia y ginecología, tales como:



INFECCIONES POR PROCEDIMIENTOS GUIADOS POR LA SUPERFICIE DE LA PIEL

CAUSADAS POR *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* Y *PSEUDOMONAS AERUGINOSA*



ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUALES

CAUSADAS POR EL VPH, EL VIH Y *CHLAMYDIA TRACHOMATIS*



RIESGO DE TRANSMISIÓN DE CORONAVIRUS*

ESPECIALMENTE PREOCUPANTE EN PACIENTES EMBARAZADAS



VAGINITIS POR BACTERIAS Y LEVADURAS

CAUSADA POR *GARDNERELLA VAGINALIS* (BACTERIA) Y *CANDIDA ALBICANS* (YEAST)



MAYOR RIESGO DE CONTAMINACIÓN FECAL

CAUSADA POR *ESCHERICHIA COLI*

CUMPLIMIENTO

Tristel Duo ULT cumple la norma EN 14885:2018 y las últimas normas aplicables publicadas

EFICAZ

Tristel Duo ULT es esporicida, micobactericida, virucida, fungicida y bactericida

RÁPIDO

Tristel Duo ULT es eficaz en un tiempo de contacto de sólo 30 segundos

COMPATIBLE


Probado y confirmado por los principales fabricantes

MÓVIL

Tristel Duo ULT puede utilizarse donde sea necesario sin las limitaciones de los sistemas automatizados

CONVENIENTE

La formación puede darse a través del portal de formación en línea a su conveniencia

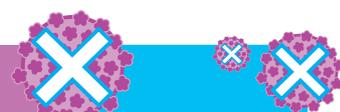

TRISTEL DUO ULT

DESTRUYE EL VPH en dispositivos reales**

ENCUENTRE MÁS: [BIT.LY/HPVARTICLE](https://bit.ly/HPVARTICLE)

**Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) "The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes" DOI: 10.1002/jmv.25666.

Duo Wipes están diseñadas específicamente para la aplicación de Tristel Duo ULT

Duo Wipes están fabricadas con 100% polipropileno no tejido (18 g/m²) que genera poca pelusa, y pre-cortadas para evitar el desprendimiento cuando se dispensan del bote.

El uso de las toallitas Duo Wipes permite la liberación eficaz del desinfectante sobre la superficie.



DUO WIPES

- 200 toallitas por bote / 6 botes por caja

TRISTEL DUO ULT

- 125ml Tristel Solución Base (ácido cítrico) + 125ml de solución activadora Tristel (clorito sódico)

Cuando se mezcla al pulsar la bomba de espuma, se genera la química patentada de dióxido de cloro de Tristel.

- 310 dosis por botella / 6 botellas por caja

DUO DOK

- Diseñado para tener a mano Tristel Duo ULT
- 5 por paquete