


IL SISTEMA DI SALVIETTE PER LA DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO PIÙ APPROVATO, CONVALIDATO E UTILIZZATO

Per dispositivi medici semi-critici, non canalizzati come:

- Nasofaringoscopi
- Sonde transvaginali e transrettali
- Sonde transesofagee (TEE)
- Laringoscopi
- Cateteri per manometria
- Strumenti di oftalmologia

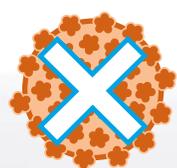

EFFICACE CONTRO I TIPI 16 E 18 DELL'HPV IN 30 SECONDI*

*Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) "The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes" DOI: 10.1002/jmv.25666.

IL SISTEMA DI SALVIETTE TRISTEL TRIO È FACILE DA USARE!



PULIZIA

Salvietta Detergente Tristel

Pulisce in profondità gli strumenti eliminando sporcizia e materiale organico tramite una soluzione tensioattiva enzimatica a tripla azione.



DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO

Salvietta Sporidica Tristel

L'azione combinata con la Schiuma di Attivazione produce il diossido di cloro, una sostanza di elevata efficacia biocida contro batteri, virus, funghi, micobatteri e spore in 30 secondi.



RISCIACQUO

Salvietta Risciacquante Tristel

Imbevuta di acqua deionizzata, è utilizzata per rimuovere gli eventuali residui chimici dalla superficie. La Salvietta Risciacquante è sterilizzata mediante raggi gamma.



TRACCIABILITÀ

Tristel 3T o il Registro di Tracciabilità

Progettati per facilitare la documentazione di tutte le fasi del processo di decontaminazione, compresa la convalida da parte dell'operatore.

Tristel TrioTM
Wipes System



Salvietta Detergente Tristel
Dispositivo Medico Classe I



Salvietta Sporidica Tristel
Dispositivo Medico Classe IIB



Salvietta Risciacquante Tristel
Dispositivo Medico Classe I

STERILE



EFFICACIA SUPERIORE

La Salvietta Sporidica Tristel é convalidata come disinfettante di alto livello in 30 secondi secondo le norme europee EN 14885 e i piú recenti standard di efficacia pubblicati. L'efficacia del prodotto e il suo tempo di contatto uniforme escludono qualsiasi dubbio.



FLESSIBILE

Il Sistema di Salviette Tristel Trio é una soluzione flessibile che puó essere utilizzato nell'ambulatorio o nell'area dedicata alla decontaminazione. Elimina la necessitá di trasportare il dispositivo alle centrali di sterilizzazione, risparmiando tempo.



COMPATIBILE

Il Sistema di Salviette Tristel Trio é stato ampiamente testato e approvato come compatibile da oltre 30 produttori di dispositivi medici, tra cui:

- Advanced Tactile Imaging, Inc.
- Airtraq*
- Arthrex
- ATMOS MedizinTechnik
- Becton Dickinson (Bard Access, CareFusion)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon (Toshiba)
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- Clarus Medical
- Crystal Photonics
- Echosens
- Esaote*
- Exact Imaging
- Fisher & Paykel
- GE Healthcare
- Haag-Streit
- Hitachi
- Karl Storz
- Laborie (Cogentix Medical, MMS)
- Machida Endoscope Co.
- MCube
- Medcom
- Medtronic
- Mindray
- Neoplas Tools
- Ocular Instruments Inc
- Optim LLC
- Orlvision
- Pentax
- Philips
- Polydiagnost
- Samsung Healthcare
- SapiMed
- Siemens Healthineers
- SonoScape*
- FUJIFILM SonoSite
- Unisensor
- Verathon

* Compatibile con la Salvietta Sporidica Tristel, parte del Sistema di Salviette Trio



RAPIDO

Ciclo completo di decontaminazione, inclusa la tracciabilitá, in pochi minuti.



TRACCIABILITÀ SMART

Il Sistema di Salviette Tristel Trio include il registro di tracciabilitá utilizzato per tracciare ogni ciclo di decontaminazione. Tristel 3T permette di digitalizzare la tracciabilitá in maniera piú efficiente, accurata e smart.



ECONOMICO

Non richiede investimenti in macchinari e contratti di manutenzione.



SICURO

La Salvietta Sporidica Tristel non é tossica per gli embrioni e puó essere utilizzata nelle aree della fecondazione in-vitro.

Il Sistema di Salviette Tristel Trio consente il completo ricondizionamento dei dispositivi medici semi-critici, non canalizzati. La pulizia, disinfezione di alto livello e il risciacquo possono essere realizzati in tre semplici e veloci passi.



Test Microbiologici

	Norme europee (EN)	Tempo di contatto uniforme
Batteri	EN 13727	
	EN 14561	
	EN 16615	
Lieviti/ Funghi	EN 13624	
	EN 14562	
	EN 16615	
Virus	EN 14476	
	EN 16615	
Micobatteri	EN 14348	
	EN 14563	
Spore	EN 16615	
	EN 17126	

SISTEMA DI SALVIETTE TRISTEL TRIO 50

• 1 confezione include 50 cicli di decontaminazione, disponibile con o senza il Registro di Tracciabilitá. Tristel 3T é venduto separatamente.



Maggiori informazioni sul Sistema di Salviette Tristel Trio, le Schede di Sicurezza, gli studi e le pubblicazioni sono disponibili su richiesta o sul sito www.tristel.com

TRASPORTO DEI DISPOSITIVI MEDICI

Tristel Protect bags sono ideate specificatamente per il trasporto e lo stoccaggio di breve termine dei dispositivi medici, senza comprometterne la tracciabilitá.

TRISTEL PROTECT

- 50 bags per confezione.
- Disponibili in formato small (21cm x 34cm) per laringoscopi e large (31cm x 71cm) per nasendoscopi.



Tristel
WE HAVE CHEMISTRY.

Prodotto nel Regno Unito da:
Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E email@tristel.com - W www.tristel.com

Italia: Tristel Italia srl, via Edoardo Collamarini 14, 40138 Bologna
T +39 051 0014912 - E infoitalia@tristel.com - W www.tristel.com

Per informazioni sui brevetti Tristel visitate: <http://www.our-patents.info/tristel>